

МініДам (MiniDam)

засіб для захисту ясен силіконовий
(gingival guard, silicone)

ОПИС ВИРОБУ

Виготовлений із силікону засіб для захисту ясен допомагає забезпечити відносно сухе середовище у проксимальній зоні між двома зубами та захистити ясна від впливу стоматологічних матеріалів.

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Забезпечення відносно сухого середовища за наявності повного зубного ряду, наприклад, під час використання Айкон (Icon) або композитних пломбувальних матеріалів.

ПОКАЗАННЯ

- карієс;
- флюороз;
- ідіопатичні плями або плями, що виникли внаслідок травми;
- втрата зубних тканин через травму, стирання зуба або порушення розвитку

Протипоказання

Не використовуйте, якщо є контактна алергія або алергія до одного з компонентів.

Цільова група пацієнтів

Особи, які проходять процедуру лікування зубів

Цільова група користувачів


Стоматологи

Вказівки із застосування


- МініДам від DMG з міркувань гігієни використовується одноразово і для лікування тільки одного пацієнта.
- Не допускайте пошкодження засобу для захисту ясен зубною ниткою та іншими матеріалами. Якщо засіб для захисту ясен пошкоджено, не користуйтеся ним.

Рекомендований спосіб застосування

1. Очистьте робочу зону.
2. Якщо зуби розташовані дуже близько один до одного, розділіть їх клинцем.
3. Попередньо розтягніть засіб для захисту ясен, трохи відтягнувши язички в сторони.
4. Тримайте засіб для захисту ясен над ураженими зубами. Переконайтеся у тому, що язички направлені на робочу зону (рис. 1).

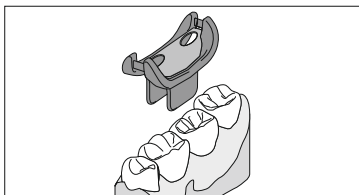


5. Відтягніть язички в сторони (рис. 2).

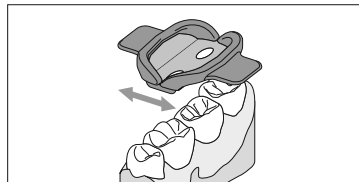


6. Розмістіть засіб для захисту ясен так, щоб його міжзубні перемички були над міжзубними проміжками.

Примітка. Середня міжзубна перемичка служить для захисту робочої зони.

7. Натягніть засіб для захисту ясен на зуби у напрямку ясен, доки міжзубні перемички не потраплять у міжзубну зону (рис. 3).

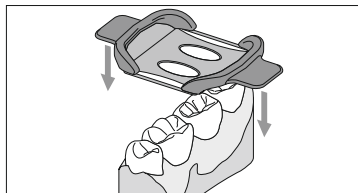


8. Відпустіть засіб для захисту ясен (рис. 4).

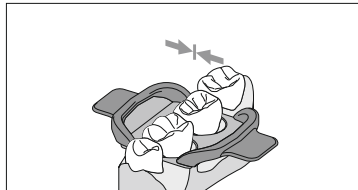


9. Підігніть засіб для захисту ясен у ділянці пришийкової зони ізолюваних зубів.

10. Зігніть язички у пришийковій зоні (рис. 5).

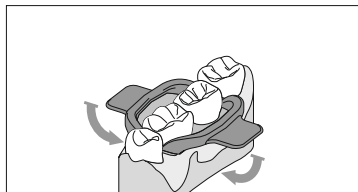

11. Видаліть розділові клинці, якщо треба.

12. Переконайтеся у тому, що засіб для захисту ясен правильно встановлено, та поправте його у разі потреби (рис. 6).

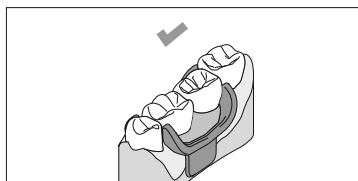

13. Якщо необхідно, можна вжити додаткових заходів, які допоможуть забезпечити сухе середовище (наприклад, застосувати ватні валики й аспірацію).
14. Проведіть лікування.
15. Зніміть засіб для захисту ясен і викиньте його.

Взаємодія

Інформація про взаємодію цього матеріалу з іншими матеріалами на цей момент невідома.

Залишкові ризики та побічна дія

Дотепер побічних дій не виявлено. Не можна виключати залишковий ризик підвищеної чутливості до компонентів матеріалу.

Попередження та запобіжні заходи

- Зберігайте у недоступному для дітей місці!
- Дотримуйтеся вказівок виробника інших виробів, які використовуються разом із цим матеріалом або матеріалами.
- Про серйозні випадки, пов'язані з цим виробом, необхідно повідомляти виробника та відповідальним органам у справах реєстрації.

Функціональні характеристики виробу

- Міцність на розрив > 15 N
- Подовження під час розриву > 15 мм

Умови зберігання та порядок утилізації

- Зберігайте у сухому місці за температури (15-25 °C/ 59-77 °F).
- Утилізуйте відповідно до вимог державного законодавства

Склад

Силіконові еластomers (приблизно 99%), барвники, добавки.

Пакування

20 штук	артикул 220381
4 штуки	артикул 220382

	Медичний виріб
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Артикул
	Використати до
	Номер партії
	Виробник
	Серійний номер
	Гранична температура



ДМГ Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмбХ
Елбгауштрассе 248,
22547 Гамбург, Німеччина
DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Elbgaustraße 248, 22547,
Hamburg, Germany
 Виготовлено в Німеччині

Уповноважений представник в Україні: 

ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua



Дата перегляду інструкції: 09/2024